

⚠️ WARNINGS ⚠️

WARNING: Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.

WARNING: If you experience, or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.

WARNING: This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.

CAUTION: Follow application and care process described in instructions.

CAUTION: For single patient use only.

NOTICE TO USERS: If any serious incident has occurred in relation to the device, report to Breg and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

⚠️ ADVERTENCIAS ⚠️

ADVERTENCIA: Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.

ADVERTENCIA: Si usted experimenta, o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.

ADVERTENCIA: Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.

PRECAUCIÓN: Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.

PRECAUCIÓN: Para uso en un solo paciente.

AVISO PARA LOS USUARIOS: Si se produce un incidente grave debido a este dispositivo, informe a Breg y a la autoridad competente del Estado miembro donde esté establecido el usuario o el paciente.

⚠️ AVERTISSEMENTS ⚠️

ATTENTION: Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.

ATTENTION: En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

ATTENTION: Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La réadaptation et les changements aux activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.

MISE EN GARDE: Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.

MISE EN GARDE: À utiliser pour un seul patient.

AVIS AUX UTILISATEURS: Si un incident grave survient avec le dispositif, signalez-le à Breg et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur ou le patient est situé.



Buttress Support Instructions for Use


Soporte de refuerzo Instrucciones de uso

Genouillère de renfort Mode d'utilisation



2382 Faraday Avenue, Suite 300
Carlsbad, CA 92008 U.S.A.
Toll Free Tel: 1-800-321-0607
Local: +1-760-795-5440
Fax: +1-760-795-5295
www.breg.com


© 2023 Breg, Inc. All rights reserved.

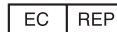

E/U authorized representative
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany



1

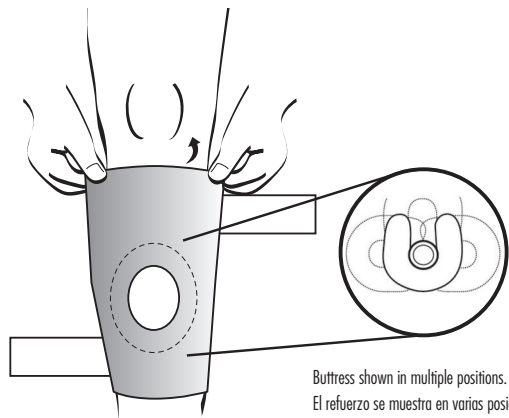

Buttress shown in multiple positions.
El refuerzo se muestra en varias posiciones.
Renfort représenté dans plusieurs positions.

1. Apply to Knee

Grasp edges of the sleeve at the larger opening. Step through sleeve, pulling it up to the knee so that the opening at the front surrounds the knee cap.


1. Colocar en la rodilla

Tomar los bordes de la manga por la abertura más grande. Pasar la pierna por la manga, jalándola hasta la rodilla de modo que la abertura en el frente rodee la rótula.

1. Posez autour du genou

Saisissez les bords du manchon par la plus grande ouverture. Passez la jambe par le manchon, en tirant vers le haut jusqu'à ce que l'ouverture pour le genou soit centrée sur la rotule.

2

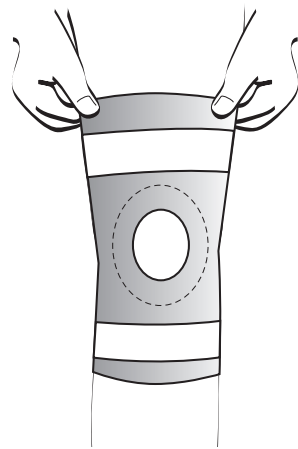

2. Secure Straps

Starting with the lower strap, feed straps through the D-rings and secure. Fit should be snug but not too tight so as to restrict circulation.

2. Asegurar las correas

Comenzando con la correa inferior, hacer pasar las correas por los anillos en forma de D. El ajuste debe ser apretado, pero no demasiado ajustado como para restringir la circulación.

2. Attache des sangles

Commencez par la sangle inférieure, faites passer les sangles par les anneaux en D et attachez. Ajustez correctement, sans trop serrer pour éviter de restreindre la circulation.

CARE & WASHING INSTRUCTIONS

Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse and lay flat to air dry.



LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LAVADO

Lave a mano en agua fría con un detergente suave, enjuáguelo y póngalo en posición plana para que se seque al aire.



INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE

Laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux. Rincer et sécher à plat.

