

Optional application instructions


- K Optional:**
To enhance liner fixation, attach the 1" x 1/2" hook pieces to the liner at malleoli foam pads (or on the foot bed of the walker).
- L Optional:**
Heel clip removal; Pull up on the heel clip.
- M Optional:**
Heel clip replacement; Lift up foot bed padding and foot plate. Slide heel clip into place using the dove-tail slot guides. Release and push the foot plate and padding down into proper position

Care instructions

- After initial application, the Vectra walker boot may be removed and reapplied without removing liner from boot.
- Hand wash the liner and straps with mild soap, rinse thoroughly and air dry. Do not wash or dry in any mechanical device.
- Extra liners with strap sets are available from Customer Care: (800) 321-0607

NOTICE TO USERS

If any serious incident has occurred in relation to the device, report to Breg and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

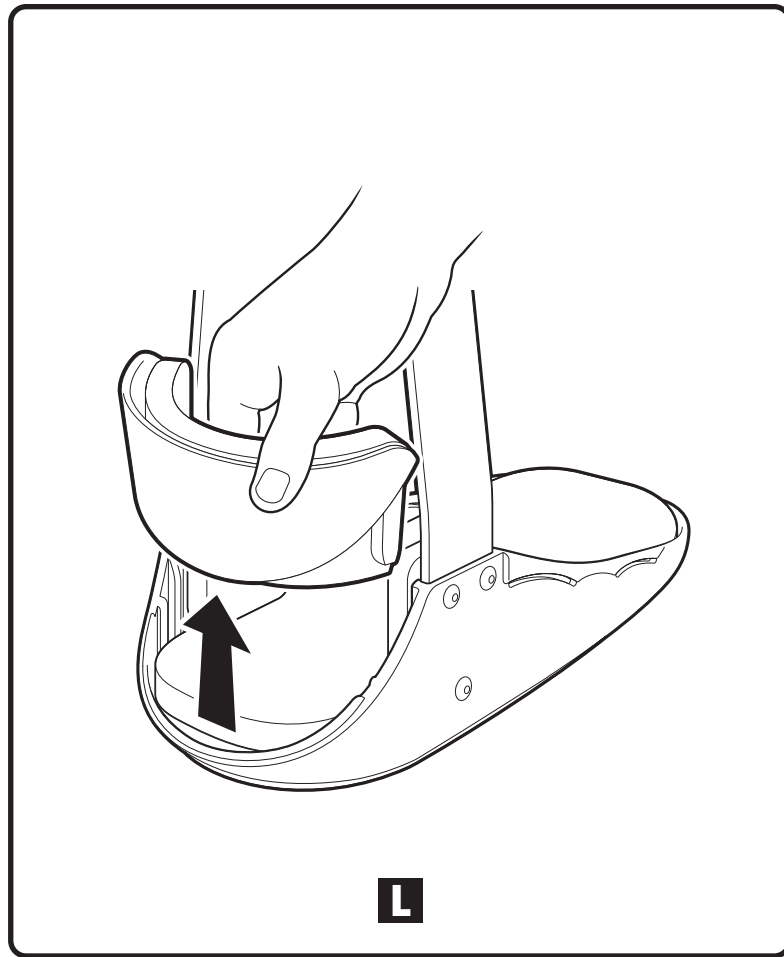

Optionale Anwendungshinweise


- K Optional:**
Für eine bessere Befestigung der Einlagen die 2,54 x 1,27 cm Klettstreifen an den Malleoli-Schaumstoffpolstern (oder am Fußbett des Walkers) fixieren.
- L Optional:**
Entfernung des Fersenclips: Fersenclip nach oben ziehen.
- M Optional:**
Fersenclip wieder anbringen: Fußbettpolsterung und Fußplatte anheben. Fersenclip mithilfe der keilförmigen Schlitzführungen einschieben, bis er einrastet. Fußplatte und Polsterung freigeben und bis zur richtigen Positionierung nach unten drücken.

Anweisungen zur Pflege

- Nach der ersten Anwendung kann der Vectra Walker-Stiefel abgenommen und wieder angelegt werden, ohne dass die Einlage aus dem Stiefel entfernt werden muss.
- Die Einlage und Gurte können mit einem milden Waschmittel von Hand gereinigt werden; gründlich nachspülen und an der Luft trocknen lassen. Nicht in mechanischen Geräten irgendwelcher Art waschen oder trocknen.
- Zusätzliche Einlagen, mit Gurten, sind über unseren Kundendienst erhältlich: +1 800 321 0607

HINWEIS FÜR ANWENDER

Schwerwiegende Vorfälle in Bezug auf das Produkt sind Breg und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist, zu melden.

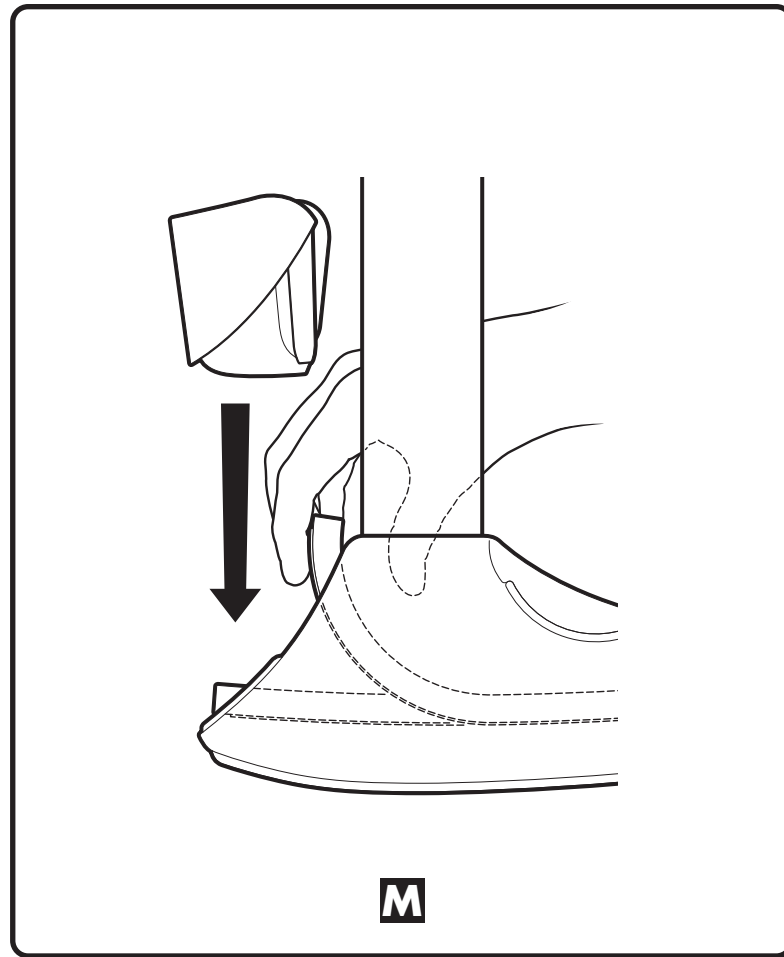

Istruzioni opzionali per l'applicazione

- K Opzionalmente**
Per migliorare l'adesione della fodera, fissare gli inserti in materiale adesivo a ganci, da 2,54 x 1,27 cm, alla fodera all'altezza dei cuscinetti in espanso per i malleoli (o sulla soletta interna dello stivaletto).
- L Opzionalmente**
Rimozione del copricalcagno: tirarlo verso l'alto.
- M Opzionalmente**
Sostituzione del copricalcagno: sollevare la soletta interna imbottita e la piastra plantare. Inserire il copricalcagno in posizione, aiutandosi con le guide a coda di rondine. Rilasciare e spingere verso il basso la piastra plantare e l'imbottitura, fino ad ottenere l'assestamento ottimale.

Istruzioni per la cura del prodotto

- Dopo l'applicazione iniziale, lo stivaletto Vectra per la deambulazione può essere rimosso e riapplicato senza togliere la fodera dallo stivaletto.
- Lavare a mano la fodera ed i cinturini con un detersivo neutro, sciacquarli accuratamente e farli asciugare all'aria. Non lavare né asciugare usando dispositivi meccanici.
- Le fodere con i set di cinturini di ricambio sono disponibili presso il servizio di assistenza alla clientela: +1 800 321 0607

AVVISO PER GLI UTENTI

In caso di incidente grave in relazione al dispositivo, inviare una segnalazione a Breg e all'autorità competente dello stato membro di residenza dell'utente e/o del paziente.

Instructions relatives aux applications optionnelles

- K Option :**
Meilleure fixation de la doublure ; pour améliorer la fixation de la doublure, vous pouvez fixer les carrés de fermeture de 2,54 x 1,27 cm à la doublure, au niveau des coussinets de mousse pour la malléole (ou de l'assise plantaire de l'orthèse de marche).
- L Option :**
Retrait de la talonnette ; tirez la talonnette vers le haut.
- M Option :**
Remise en place de la talonnette ; soulevez le coussinet de l'assise plantaire et de la plaque de pied. Pour mettre la talonnette en place, faites-la glisser sur les guides à fentes en queue d'aronde. Libérez la plaque de pied et le coussinet et poussez dessus pour les mettre en place.

Consignes d'entretien

- Après l'utilisation initiale, vous pouvez enlever et réutiliser l'orthèse de marche Vectra sans retirer la doublure de la botte.
- Lavez la doublure et les sangles à la main, avec un savon doux, rincez-les bien, puis laissez-les sécher à l'air. Ne les lavez pas ou ne les séchez pas en machine.
- Pour vous procurer des doublures supplémentaires avec leurs sangles, contactez le service clientèle en composant le : +1 800 321 0607

AVIS AUX UTILISATEURS

Si un incident grave survient avec le dispositif, signalez-le à Breg et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur ou le patient est situé.

Instrucciones opcionales de aplicación

- K Opcional:**
Para fijar el forro al máximo, sujete las piezas de gancho de 2,54 x 1,27 cm al forro en los acolchados de espuma de los maléolos (o en la plantilla de la bota).
- L Opcional:**
Retirada del clip para el talón; extraiga hacia arriba el clip para el talón.
- M Opcional:**
Reemplazo del clip para el talón; levante el acolchado de la plantilla y la placa del pie. Deslice el clip para el talón en posición utilizando las ranuras de guía en cola de milano. Suelte y empuje hacia abajo la placa del pie y el acolchado hasta que queden en el lugar adecuado.

Instrucciones de cuidado

- Después de la aplicación inicial, la bota Vectra puede quitarse y volverse a colocar sin tener que quitar el forro de la bota.
- Lave a mano el forro y las tiras con jabón suave, enjuáguelos bien y séquelos al aire. No los lave ni los seque a máquina.
- Puede obtener forros y conjuntos de tiras adicionales del departamento de Atención al Cliente: +1 800 321 0607

AVISO PARA LOS USUARIOS

Si se produce un incidente grave debido a este dispositivo, informe a Breg y a la autoridad competente del Estado miembro donde esté establecido el usuario o el paciente.