

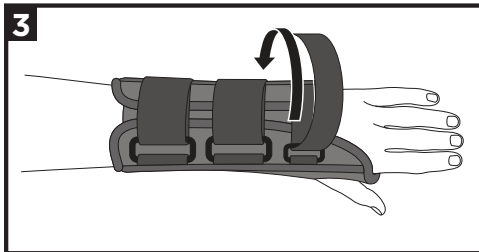
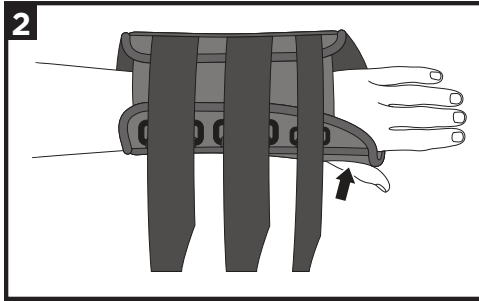


CLASSIC WRIST BRACE

ÓRTESES CLÁSICA
ORTHÈSE CLASSIQUE





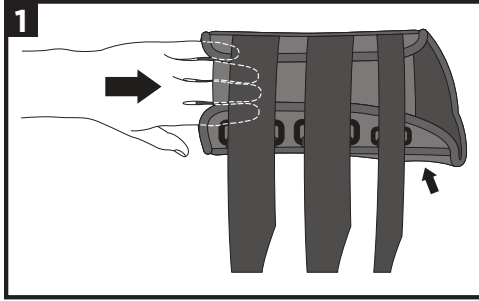


BRACE MODIFICATION/ADJUSTABILITY MODIFICACIÓN/AJUSTABILIDAD DEL SOPORTE MODIFICATION/AJUSTEMENT DE L'ORTHÈSE

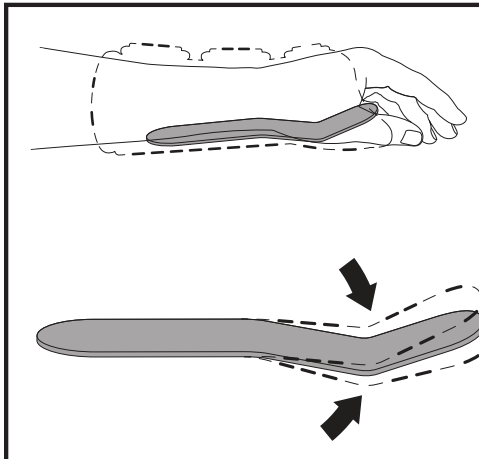

CLASSIC WRIST BRACE W/ THUMB SPICA

ÓRTESES CLÁSICA PARA MUÑECA CON FÉRULA PARA PULGAR
ORTHÈSE CLASSIQUE AVEC SPICA DU POUCE

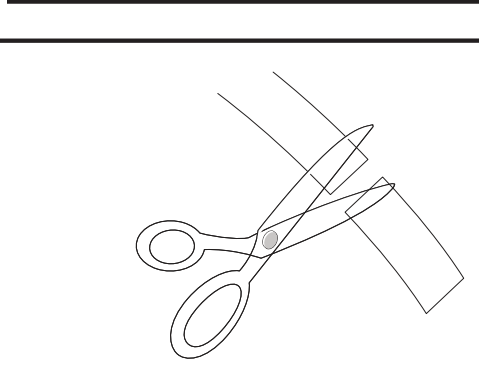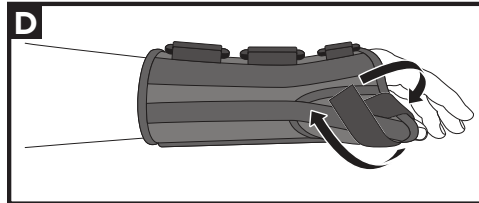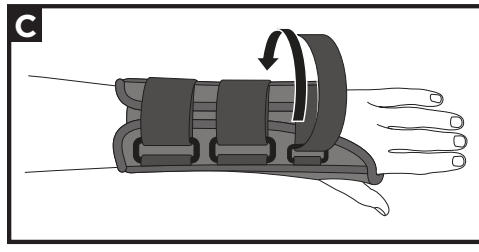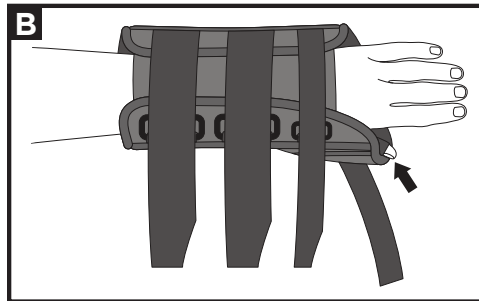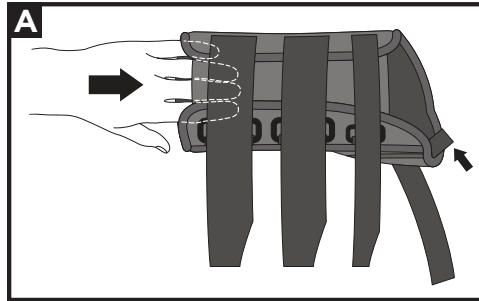

ENGLISH

INTENDED USE/INDICATIONS:

This brace is intended to provide support and stabilization of the wrist joint and forearm where indicated by a healthcare professional.

INTENDED USERS:

The intended user should be a licensed professional, the patient, or patient's caregiver. The user should be able to read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

CONTRAINDICATIONS:

Not Applicable.

⚠️ WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.
- If you experience or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.
- This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.
- Follow application and care process described in the instructions.
- For single patient use only.

INSTRUCTIONS FOR USE:

CLASSIC WRIST BRACE

1. Slide the brace onto affected hand. Be sure thumb and thumb hole on the side of the brace are aligned.
2. Slide thumb into the hole in the side of the brace.
3. Thread the three closure straps through D-rings and secure to brace.

CLASSIC WRIST BRACE W/ THUMB SPICA

- A. Slide the brace onto affected hand. Be sure thumb and elastic thumb loop are aligned.
- B. Slide thumb into elastic thumb loop.
- C. Thread the three closure straps through D-rings and secure to brace.
- D. Wrap thumb strap around the injured thumb and secure to brace.

BRACE MODIFICATION/ADJUSTABILITY

- The curvature of the metal stay on the bottom of the brace should fit into the palm of the hand and extend down the forearm.
- If necessary, remove the malleable metal stay and bend it to the appropriate position.
- Trim hook and loop closure straps, leaving approximately 1" - 2" of overlap.

USE AND CARE:

Remove metal stay. Hand wash in 30°C (86°F) water with mild soap, rinse thoroughly. Rinse and lay flat to air dry. Do not machine wash or tumble dry.

MATERIAL CONTENT:

Aluminum, Cotton, Nylon, Polyester

WARRANTY:

Breg products come with a limited warranty against manufacturing and material defects. No other warranty, expressed or implied, is given and no affirmation of or by seller, by words or action, will constitute a warranty. Please see www.breg.com

DISPOSAL:

Dispose of product according to local regulations.

AW-1.03603 Rev C 04/25

© 2025 Breg, Inc. All rights reserved.

www.breg.com

Local: +1-760-795-5440

Fax: +1-760-795-5295

Toll Free Tel: 1-800-321-0607

Carlsbad, CA 92008 USA

2382 Faraday Avenue, Suite 300



breg.com/classicwrist



Classic Wrist Brace

Example illustrates left hand brace application.

Órtesis clásica para muñeca

El ejemplo muestra el uso de la órtesis en la mano izquierda.

Orthèse classique pour poignet




L'exemple illustre l'installation de l'appareil orthopédique sur le bras gauche.



CLASSIC WRIST BRACE

ÓRTESIS CLÁSICA


ORTHÈSE CLASSIQUE

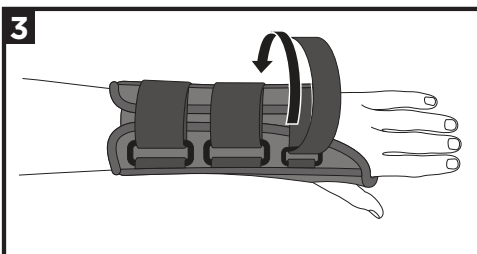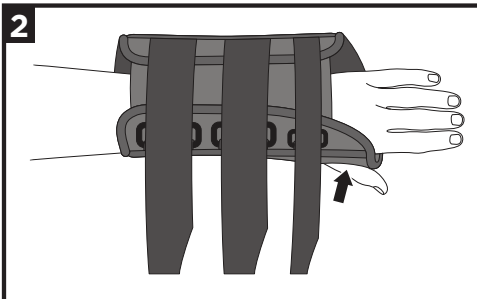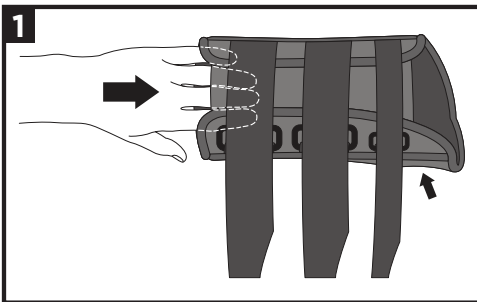

BRACE MODIFICATION/ADJUSTABILITY

MODIFICACIÓN/AJUSTABILIDAD DEL SOPORTE





MODIFICATION/AJUSTEMENT DE L'ORTHÈSE

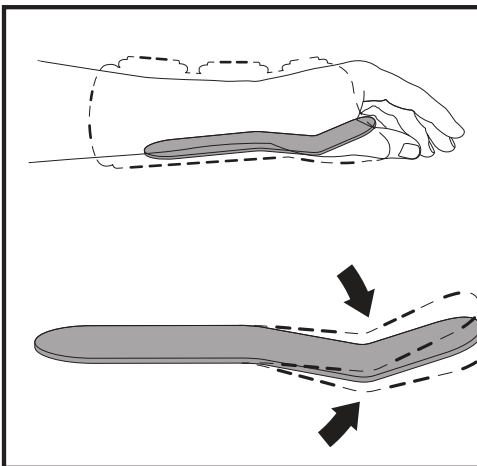

CLASSIC WRIST BRACE W/ THUMB SPICA

ÓRTESIS CLÁSICA PARA MUÑECA CON FÉRULA PARA PULGAR

ORTHÈSE CLASSIQUE AVEC SPICA DU POUCE

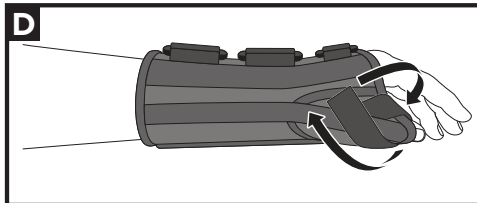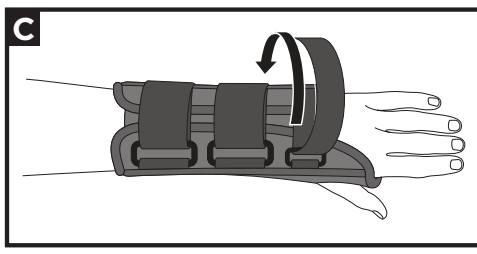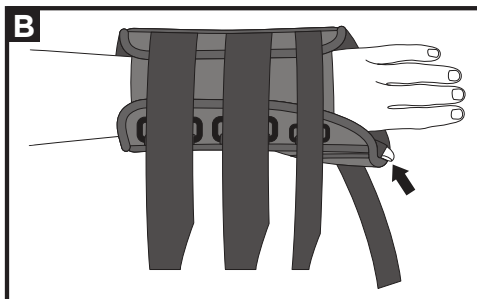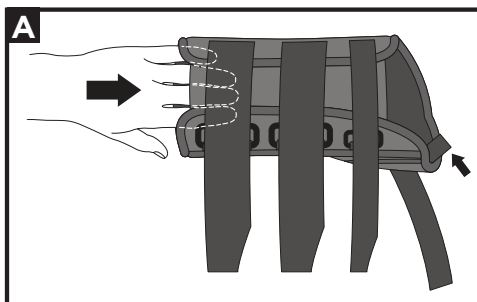

ESPAÑOL

USO INDICADO/INDICACIONES:

This brace is intended to provide support and stabilization of the wrist joint and forearm where indicated by a healthcare professional.

USUARIOS PREVISTOS:

Este dispositivo está destinado a ser utilizado por un profesional sanitario autorizado, el paciente o su cuidador/a. El usuario debe ser capaz de leer y comprender todas las instrucciones, advertencias y precauciones incluidas en la información de uso, así como tener capacidad física para seguir las indicaciones correctamente.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicable.

⚠ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.
- Si usted experimenta o tiene aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.
- Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.
- Siga el proceso de aplicación y cuidado descritos en las instrucciones.
- Para uso en un solo paciente.

INSTRUCCIONES DE USO:

ÓRTESIS CLÁSICA PARA MUÑECA

1. Deslice la órtesis en la mano afectada. Asegúrese de que el pulgar y la correa para el pulgar en la parte delantera de la órtesis estén alineadas.
2. Deslice el pulgar en el agujero en el lado de la órtesis.
3. Pase las tres correas de cierre a través de los anillos en D y asegure la órtesis.

ÓRTESIS CLÁSICA PARA MUÑECA CON FÉRULA PARA PULGAR

- A. Deslice la órtesis en la mano afectada. Asegúrese de que el pulgar y la anilla elástica para el pulgar estén alineadas.
- B. Deslice el dedo pulgar en la anilla elástica para el pulgar.
- C. Pase las tres correas de cierre a través de los anillos en D y asegure la órtesis.
- D. Envuelva la correa para el pulgar alrededor del pulgar afectado y fije la órtesis.

MODIFICACIÓN/AJUSTABILIDAD DEL SOPORTE

- La curvatura de la estanca de metal en la parte inferior de la órtesis de be caber en la palma de la mano y extenderse hacia el antebrazo.
- Si es necesario, quite la estanca de metal maleable y dóblela en la posición adecuada.
- Recorte las correas debajo aproximadamente de 1" a 2" de solapamiento.

USO Y CUIDADOS:

Retire la estanca de metal. Aclarar bien y dejar secar al aire. No lavar a máquina ni usar secadora.

MATERIALES:

Aluminio, algodón, nailon, poliéster

GARANTÍA:

Los productos Breg ofrecen una garantía limitada contra defectos de fabricación y materiales. No se ofrece ninguna otra garantía, expresa ni implícita. Ninguna afirmación del vendedor, por palabras o acciones, constituirá garantía alguna. Visite www.breg.com

ELIMINACIÓN:

Deseche el producto conforme a la normativa local.

FRANÇAIS

UTILISATION/INDICATIONS :

Cette orthèse est destinée à fournir soutien et stabilisation à l'articulation du poignet et de l'avant-bras lorsqu'indiqué par un professionnel de la santé.

UTILISATEURS VISÉS :

Les utilisateurs visés doivent être des professionnels agréés, le patient ou son soignant. Les utilisateurs doivent être capables de lire, de comprendre et être physiquement capables d'exécuter toutes les instructions, avertissements et précautions indiquées dans le mode d'emploi.

INDICATIONS D'UTILISATION :

Non applicable.

⚠ AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :

- Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez attentivement toutes les instructions.
- En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation de la peau ou d'autres réactions indésirables lorsque vous utilisez ce dispositif, consultez immédiatement votre praticien.
- Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La rééducation et les modifications des activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sûr. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.
- Suivez le mode d'emploi et d'entretien décrit dans ce guide.
- Utilisation réservée à un seul patient.

MODE D'EMPLOI :

ORTHÈSE CLASSIQUE

1. Faire glisser l'orthèse sur le bras affecté. S'assurer que le pouce et la sangle du pouce au devant de la prothèse sont bien alignés.
2. Glisser le pouce dans le trou sur le côté de l'orthèse.
3. Passer les trois sangles dans les anneaux et les attacher pour refermer.

ORTHÈSE CLASSIQUE AVEC SPICA DU POUCE

- A. Faire glisser la prothèse sur la main blessée. S'assurer que le pouce et la boucle élastique sont bien alignés.
- B. Faire glisser le pouce dans la boucle élastique.
- C. Passer les trois sangles dans les anneaux et les attacher pour refermer.
- D. Attacher la sangle du pouce autour du pouce blessé puis attacher la sangle à l'appareil.

MODIFICATION/AJUSTEMENT DE L'ORTHÈSE

- La courbe du support devrait tenir dans le bas de la prothèse, être ajustée à la paume de la main et s'étendre jusqu'à l'avant-bras.
- Si nécessaire, retirer le support de métal malleable et le plier dans la position appropriée.
- Coupez les sangles auto-agrippantes de manière à laisser 2,5 à 5 cm de recouvrement.

UTILISATION ET ENTRETIEN :

Retirer le support de métal. Laver à la main dans l'eau à 30 °C (86 °F) avec un savon doux, rincer soigneusement. Rincer et laisser sécher à plat à l'air libre. Ne pas laver en machine ni mettre au sèche-linge.

MATÉRIAUX :

Aluminium, Coton, Nylon, Polyester

GARANTIE :

Les produits Breg offrent une garantie limitée contre les défauts de fabrication et des matières. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est donnée et aucune affirmation du vendeur, orale ou écrite, ne constituera de garantie. Veuillez consulter www.breg.com

MISE AU REBUT :

Veuillez mettre ce produit au rebut conformément aux règles locales.