

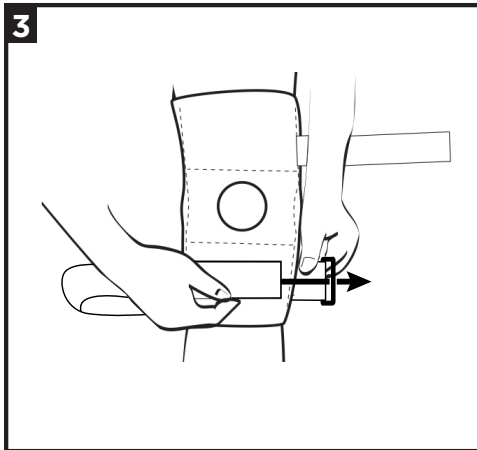
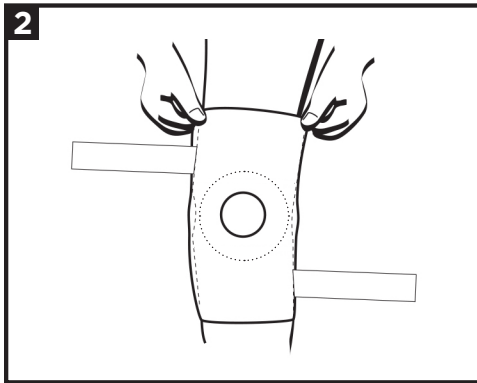
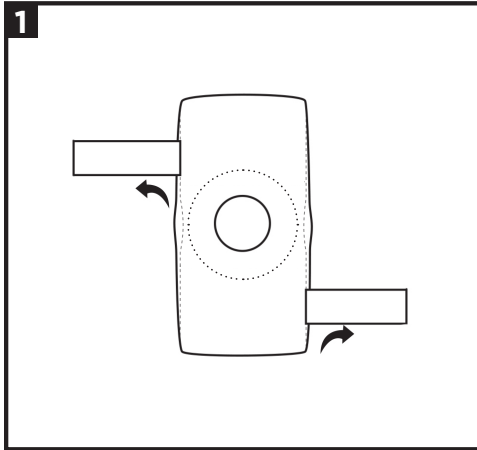
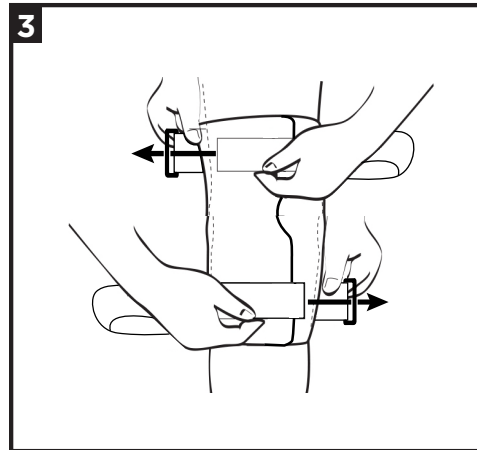


PULL ON
COLOCACIÓN
TIREZ

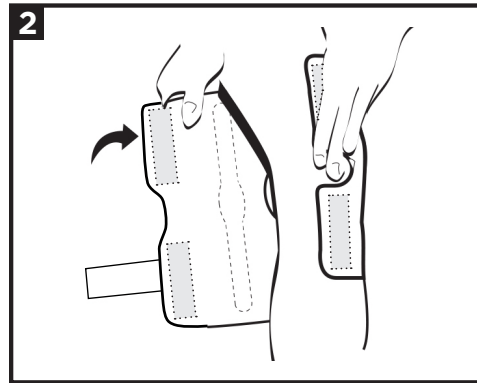

WRAP AROUND
ENROLLAR ALREDEDOR
ENROULEZ AUTOUR

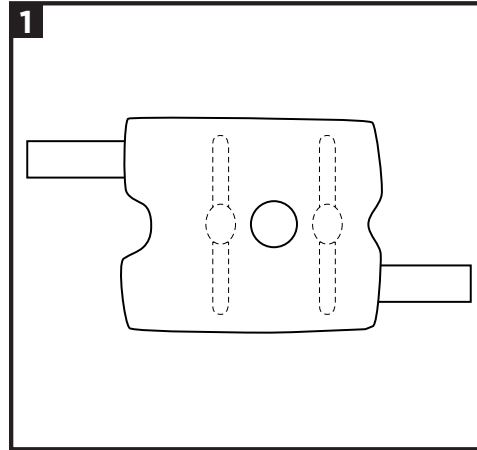

ENGLISH
INTENDED USE/INDICATIONS:

Soft Knee Bracing products provide control and support for ligament injuries and instabilities.

INTENDED USERS:

The intended user should be a licensed professional, the patient, or patient's caregiver. The user should be able to read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

CONTRAINDICATIONS:

Not Applicable.

⚠ WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.
- If you experience or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.
- This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.
- If swelling increases or pain, numbness or skin irritation occurs, discontinue use and contact your medical provider immediately. This product is only a support device, not to prevent injuries or prevent recurrence of injuries.
- Follow application and care process described in instructions.
- For single patient use only.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Unfasten straps.
2. Step into the brace at the widest opening. Pull the brace up the leg until hinges align with the knee. For the wrap around version, align the hinges on the sides of the knee. Wrap the brace around the leg and secure the flaps. The opening should be directly over the knee cap.
3. Loop straps through the rings and pull back over the top of the lower thigh and upper calf, then fasten the hook and loop closure.
4. Adjust straps for comfort and fit. The brace should be snug, but not uncomfortably tight.

NOTE: Do not overtighten, adjust as necessary.

USE AND CARE:

Hand wash in 30°C (86°F) water with mild soap, rinse thoroughly. Rinse and lay flat to air dry. Do not machine wash or tumble dry.

MATERIAL CONTENT:

Aluminum, Neoprene, Nylon, Polyoxymethylene (POM)

WARRANTY:

Breg products come with a limited warranty against manufacturing and material defects. No other warranty, expressed or implied, is given and no affirmation of or by seller, by words or action, will constitute a warranty. Please see www.breg.com

DISPOSAL:

Dispose of product according to local regulations.

AW-1.03604 Rev C 04/25
© 2025 Breg, Inc. All rights reserved.
www.breg.com
Local: +1-760-795-5440
Fax: +1-760-795-5295
Toll Free Tel: 1-800-321-0607
Carlsbad, CA 92008 USA
2382 Faraday Avenue, Suite 300



breg.com/hingedkneesupport






Hinged Knee Support

Soporte con bisagra para rodilla




Genouillère articulée



**PULL ON
COLOCACIÓN
TIREZ**

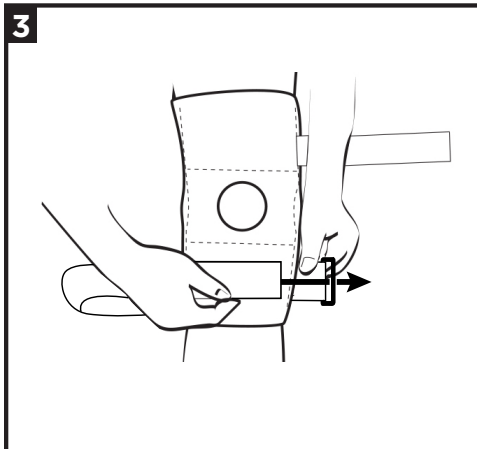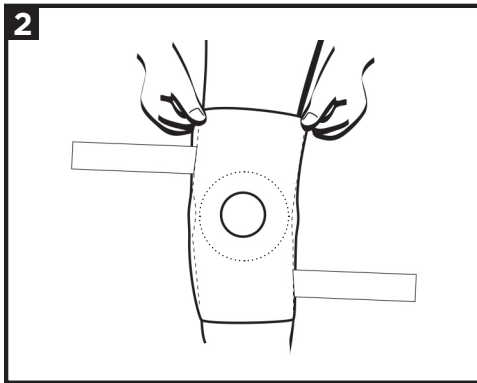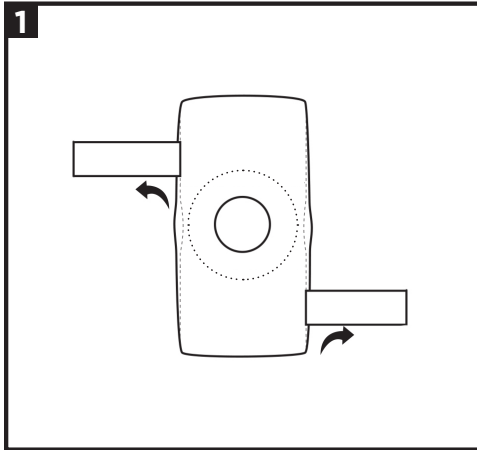

**WRAP AROUND
ENROLLAR ALREDEDOR
ENROULEZ AUTOUR**

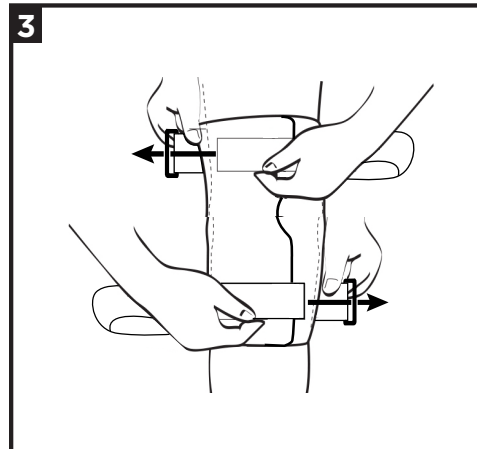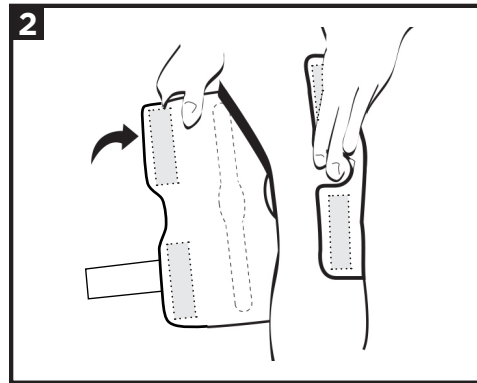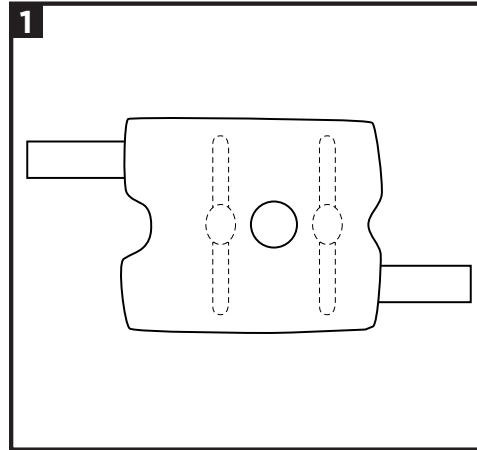

**ESPAÑOL
USO INDICADO/INDICACIONES:**

Los productos de soporte suave para la rodilla brindan control y apoyo para lesiones e inestabilidades de los ligamentos.

USUARIOS PREVISTOS:

Este dispositivo está destinado a ser utilizado por un profesional sanitario autorizado, el paciente o su cuidador/a. El usuario debe ser capaz de leer y comprender todas las instrucciones, advertencias y precauciones incluidas en la información de uso, así como tener capacidad física para seguir las indicaciones correctamente.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicable.

⚠️ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.
- Si usted experimenta o tiene aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.
- Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.
- Si la inflamación o el dolor aumentan, o si se presenta entumecimiento o irritación de la piel, suspenda el uso y comuníquese con su proveedor médico de inmediato. Este producto es únicamente un dispositivo de apoyo, no evita lesiones ni la recurrencia de lesiones.
- Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.
- Para uso en un solo paciente.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Afloje las correas.
2. Coloque el soporte en la abertura más amplia. Tire de la órtesis hacia arriba de la pierna hasta que las bisagras se alineen con la rodilla. Para la versión envolvente, alinee las bisagras en los costados de la rodilla. Coloque la órtesis alrededor de la pierna y asegure las solapas. La abertura debe quedar directamente encima de la rótula.
3. Pase las correas a través de los anillos y tire hacia atrás sobre la parte superior del muslo y la parte superior de la pantorrilla, luego ajuste el cierre de gancho y bucle.
4. Ajuste las correas para mayor comodidad y ajuste. La órtesis debe quedar ajustada, pero no incómodamente apretada.

NOTA: No apriete excesivamente, y ajuste según se requiera.

USO Y CUIDADOS:

Lavar a mano con agua a 30°C (86°F) y jabón suave, y enjuagar bien. Aclarar bien y dejar secar al aire. No lavar a máquina ni usar secadora.

MATERIALES:

Aluminio, neopreno, nailon, polioximetileno (POM)

GARANTÍA:

Los productos Breg ofrecen una garantía limitada contra defectos de fabricación y materiales. No se ofrece ninguna otra garantía, expresa ni implícita. Ninguna afirmación del vendedor, por palabras o acciones, constituirá garantía alguna. Visite www.breg.com

ELIMINACIÓN:

Deseche el producto conforme a la normativa local.

**FRANÇAIS
UTILISATION/INDICATIONS :**

Les genouillères souples offrent contrôle et soutien en cas de blessures aux ligaments et d'instabilités.

UTILISATEURS VISÉS :

Les utilisateurs visés doivent être des professionnels agréés, le patient ou son soignant. Les utilisateurs doivent être capables de lire, de comprendre et être physiquement capables d'exécuter toutes les instructions, avertissements et précautions indiquées dans le mode d'emploi.

INDICATIONS D'UTILISATION :

Non applicable.

⚠️ AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :

- Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez attentivement toutes les instructions.
- En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation de la peau ou d'autres réactions indésirables lorsque vous utilisez ce dispositif, consultez immédiatement votre praticien.
- Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La réadaptation et les modifications des activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sûr. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.
- Si le gonflement augmente ou si une douleur, un engourdissement ou une irritation cutanée devaient se produire, cessez l'utilisation et communiquez immédiatement avec votre fournisseur de soins de santé. Ce produit n'est qu'un dispositif de soutien et n'est pas destiné à prévenir les blessures ou à empêcher qu'elles se reproduisent.
- Suivez le mode d'emploi et d'entretien décrit dans ce guide.
- Utilisation réservée à un seul patient.

MODE D'EMPLOI :

1. Détacher les sangles.
2. Enfiler l'orthèse par sa plus grande ouverture. Tirer l'orthèse vers le haut de la jambe jusqu'à ce que les charnières s'alignent avec le genou. Pour la version enveloppante, aligner les charnières sur les côtés du genou. Enrouler l'orthèse autour de la jambe et fixer les rabats. L'ouverture doit se trouver directement au-dessus de la rotule.
3. Passer les sangles à travers les anneaux et tirer vers l'arrière par-dessus la partie supérieure de la cuisse et la partie supérieure du mollet, puis attacher la fermeture auto-agrippante.
4. Régler les sangles pour un ajustement confortable. L'orthèse doit être bien ajustée, mais pas inconfortablement serrée.

REMARQUE : Ne pas trop serrer, ajuster si nécessaire.

UTILISATION ET ENTRETIEN :

Laver à la main dans l'eau à 30 °C (86 °F) avec un savon doux, rincer soigneusement. Rincer et laisser sécher à plat à l'air libre. Ne pas laver en machine ni mettre au sèche-linge.

MATÉRIAUX :

Aluminium, Néoprène, Nylon, Polyoxyéthylène (POM)

GARANTIE :

Les produits Breg offrent une garantie limitée contre les défauts de fabrication et des matières. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est donnée et aucune affirmation du vendeur, orale ou écrite, ne constituera de garantie. Veuillez consulter www.breg.com

MISE AU REBUT :

Veuillez mettre ce produit au rebut conformément aux règles locales.