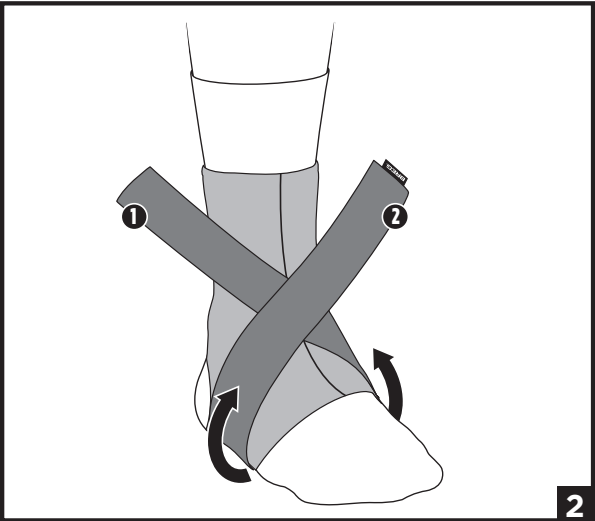
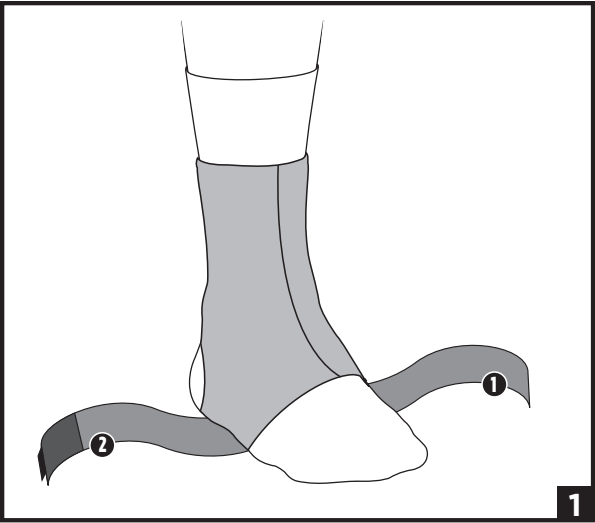




ENGLISH

INTENDED USE/INDICATIONS:

The intended use for ankle bracing products is to provide support and / or immobilization to the ankle for patients from ankle injury.

INTENDED USERS:

The intended user should be a licensed professional, the patient, or patient's caregiver. The user should be able to read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

CONTRAINDICATIONS:

Not Applicable.

⚠ WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.
- If you experience, or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.
- This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.
- Follow application and care process described in instructions.
- For single patient use only.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Slide sleeve onto foot. Position heel in the hole at the rear and bottom of the sleeve.
2. When the brace feels comfortable, cross the elastic straps over the top of the foot.
3. Continue tightly wrapping strap #1 in figure-8 design, and hold in place around the top of the ankle. Wrap strap #2 in figure-8 design, and secure tightly around the top of the ankle. Adjust for comfort.

USE AND CARE:

Hand wash in 30°C (86°F) water with mild soap, rinse thoroughly. Rinse and lay flat to air dry. Do not machine wash or tumble dry.

MATERIAL CONTENT:

Neoprene, Nylon, Polyester

WARRANTY:

Breg products come with a limited warranty against manufacturing and material defects. No other warranty, expressed or implied, is given and no affirmation of or by seller, by words or action, will constitute a warranty. Please see www.breg.com

DISPOSAL:

Dispose of product according to local regulations.

FRANÇAIS

UTILISATION/INDICATIONS :

Cette orthèse vise à fournir aux patients soutien et/ou immobilisation de la cheville souffrant d'une lésion.

UTILISATEURS VISÉS :

Les utilisateurs visés doivent être des professionnels agréés, le patient ou son soignant. Les utilisateurs doivent être capables de lire, de comprendre et être physiquement capables d'exécuter toutes les instructions, avertissements et précautions indiquées dans le mode d'emploi.

CONTRE-INDICATIONS :

Non applicable.

⚠ AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :

- Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez attentivement toutes les instructions.
- En cas d'augmentation de la douleur, de gonflement, d'irritation de la peau ou d'autres réactions indésirables lorsque vous utilisez ce dispositif, consultez immédiatement votre praticien.
- Ce dispositif ne peut ni prévenir ni réduire toutes les lésions. La rééducation et l'adaptation des activités sont également essentielles à un programme de traitement sûr. Consultez un professionnel de santé pour établir le niveau approprié d'activité avec ce dispositif.
- Suivez le processus d'application ainsi que les avertissements décrits dans les instructions.
- Utilisation réservée à un seul patient.

MODE D'EMPLOI :

1. Glisser le pied dans l'orthèse. Positionner le talon à l'arrière et en bas de l'orthèse.
2. Une fois l'orthèse confortablement installée, croiser les courroies élastiques par-dessus le pied.
3. Continuer d'enrouler la sangle n° 1 en formant un 8 et la maintenir en place autour du haut de la cheville. Enrouler la sangle n° 2 en formant un 8 et l'attacher solidement autour du haut de la cheville. Ajuster pour obtenir un port confortable.

UTILISATION ET ENTRETIEN :

Laver à la main dans l'eau à 30 °C (86 °F) avec un savon doux, rincer soigneusement. Rincer et laisser sécher à plat à l'air libre. Ne pas laver en machine ni mettre au sèche-linge.

MATÉRIAUX :

Néoprène, Nylon, Polyester

GARANTIE :

Les produits Breg offrent une garantie limitée contre les défauts de fabrication et des matières. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est donnée et aucune affirmation du vendeur, orale ou écrite, ne constituera de garantie. Veuillez consulter www.breg.com

MISE AU REBUT :

Veuillez mettre ce produit au rebut conformément aux règles locales.

ESPAÑOL

USO INDICADO/INDICACIONES:

El uso previsto de las tobilleras es ofrecer apoyo o inmovilización al tobillo en pacientes con lesión de tobillo.

USUARIOS PREVISTOS:

Este dispositivo está destinado a ser utilizado por un profesional sanitario autorizado, el paciente o su cuidador/a. El usuario debe ser capaz de leer y comprender todas las instrucciones, advertencias y precauciones incluidas en la información de uso, así como tener capacidad física para seguir las indicaciones correctamente.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicable.

⚠ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.
- Si usted experimenta, o tiene aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.
- Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.
- Siga el modo de utilización y de mantenimiento descrito en esta guía.
- Para uso en un solo paciente.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Deslice la tobillera sobre el pie. Posicione el talón en el orificio de la parte posterior e inferior de la tobillera.
2. Cuando sienta cómoda la tobillera, cruce las correas elásticas sobre la parte superior del pie.
3. Continúe envolviendo firmemente la correa n.º 1, como se muestra en el diseño en la figura 8, y manténgala alrededor de la parte superior del tobillo. Envuelva la correa n.º 2, como se muestra en el diseño en la figura 8, y fjela firmemente alrededor de la parte superior del tobillo. Ajuste hasta una posición que resulte cómoda.

USO Y CUIDADOS:

Lavar a mano con agua a 30°C (86°F) y jabón suave, y enjuagar bien. Aclarar bien y dejar secar al aire. No lavar a máquina ni usar secadora.

MATERIALES:

Neopreno, nailon y poliéster

GARANTÍA:

Los productos Breg ofrecen una garantía limitada contra defectos de fabricación y materiales. No se ofrece ninguna otra garantía, expresa ni implícita. Ninguna afirmación del vendedor, por palabras o acciones, constituirá garantía alguna. Visite www.breg.com

ELIMINACIÓN:

Deseche el producto conforme a la normativa local.



Quick Wrap Ankle Sleeve

Support de Cheville à Attache Rapide

Tobillera de Colocación Rápida

